

Anleitung SARS-CoV-2 Schnelltest für Kinder




Inhalt: 1x Teststäbchen
1x Teströhrchen
1x Testindikator

1. Öffnen Sie das Teströhrchen und stellen Sie es sicher ab, damit es nicht umkippen kann, z.B. in einem Eierbecher.

2.



Führen Sie das Stäbchen mit dem Puschel in die Nase ihres Kindes ein und drehen es **3-4x** im vorderen Nasenbereich. Das Stäbchen muss dabei die Nasenflügel und die Nasenscheidewand berühren.

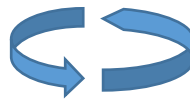


3.




Stecken Sie das Stäbchen nun in das Röhrchen und drehen es. Gleichzeitig quetschen Sie das Röhrchen mindestens **10x**. Danach ziehen Sie das Teststäbchen aus dem Röhrchen und halten es dabei gedrückt.

4.

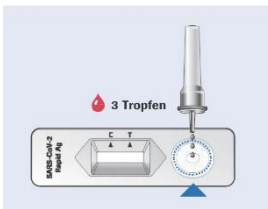

Verschließen Sie das Röhrchen mit dem Deckel. Träufeln Sie nun die Flüssigkeit in die **runde Vertiefung**.

5.

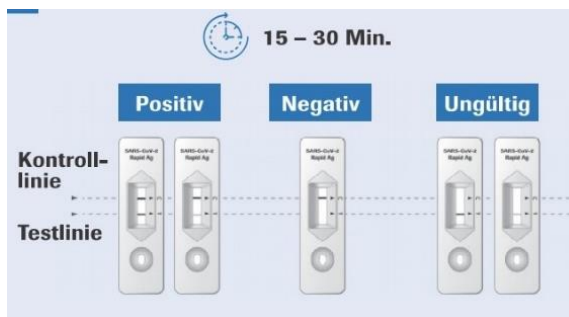

Lesen Sie das Testergebnis nach **15- 30 Minuten** ab.

**Liebe Kinder, Liebe Eltern,
vielen Dank für Eure und Ihre Mithilfe!**